


Beaverlab

スマート顕微鏡

DDL-M1C 取扱説明書

1 製品概要

この度はBeaver Labスマート顕微鏡をご購入いただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、
必要な時にすぐに参照できるよう手元に保管してください。

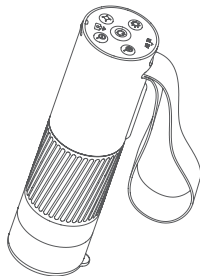

2 使用上の注意

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- レンズの保護ため、使用後はレンズキャップをきちんと閉めて、ホコリや異物が入らないようにしてください。
- 試料を配置する際は位置に気を付けてください。試料はできるだけレンズの中心の真下に配置するようにしてください。
- 防水ではありません。水に濡らさないでください。
- 落下など強い衝撃を与えないでください。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください
この取扱説明書は大切に保管してください

※ 本製品は、お手持ちのスマートフォンやタブレットと接続してご使用いただく際、アプリをダウンロードしていただく必要があります。
下記のQRコードを読み取りアプリのご準備をお願いいたします。



Android




iOS

アプリをダウンロードするにはここを
スキャンしてください

3 顕微鏡の使用法

3.1 各部名称

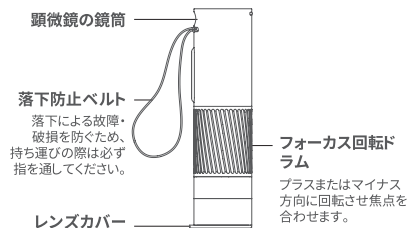

【保管環境】

- 高温多湿、直射日光を避けて、保管してください。
- ホコリを避けて保管してください。


3.2 充電



付属のUSBケーブルを
使用しパソコンまたはモバ
イルバッテリーから充電
してください。



充電時間は12時間を超えな
いください。
※ 過充電は充電池劣
化の原因になる事があります。

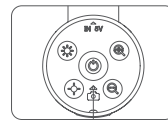

鏡筒のインジケータライト

- 顕微鏡の鏡筒の充電池残量が少ない場合、インジケータの青いランプが高速で点滅します。
- 充電中は赤いランプが常に点灯し、充電が完了するとライトが消えます。

【動作環境】



-10°Cから45°Cま
での温度環境で使
用してください



防水ではありません。
絶対には濡らさないで
ください。



火のそばで使用
しないでください。
高温の場所で保管
しないでください。



激しい衝撃を与え
たり、激しく振動
させないくださ
い。落下させない
でください。




顕微鏡の内部や
レンズにホコリ
が入らないよう
に気を付けてく
ださい

※ 気温が低い場所で使用すると、充電池の減りが速
くなることがあります。

3.3 電源を入れる


■ 顕微鏡の電源のオン・オフ方法

- 中央にある電源ボタンを3秒間長押しすると、対物レンズ側のライトが点灯します。
- オフにするときは、同様に電源ボタンを3秒間長押しします。
(使用後はレンズキャップで閉めてください。)

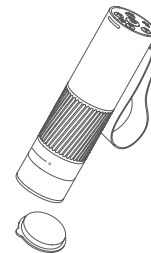

顕微鏡鏡筒のレンズキャップを取り外して、観察を
始めます。

■ トップボタンの説明

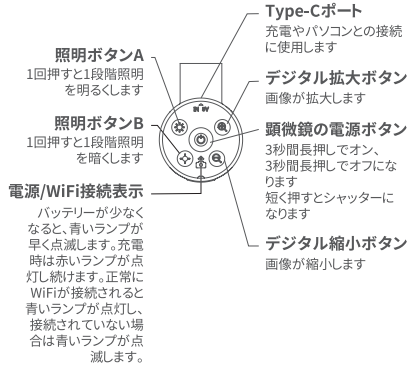


■ 倍率の調整方法


顕微鏡の先端が観察対象物に近づくほど倍率が大きくなります。
鏡筒のフォーカス回転ドラム、拡大/縮小ボタンを同時に使用して、距離を調整しながら倍率を調整してください。

■ 顕微鏡の操作手順


① 落下防止のため、落下防止ベルトに指を通し握ってください。

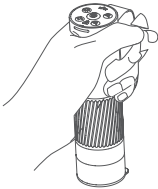

② 顕微鏡の電源を入れます。

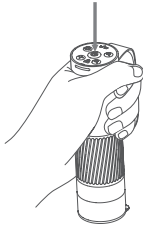

③ 専用アプリBeaver Pointを開き顕微鏡のWi-Fiに接続します。(DDL-M1X-xxxxなどと表示されます。)

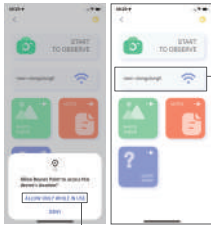


許可をクリックします

リンクをクリックします


④ レンズキャップを取り外します。



⑤ 観察したい対象物に顕微鏡を向けます。

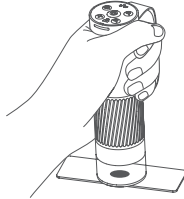

⑥ フォーカス回転ドラムをゆっくり回しながら、ご使用端末のアプリ上の画面を確認し、倍率の調整をしてください。(下絵)

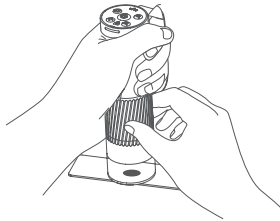

4 付属品とツール



本体



充電用ケーブル



取扱説明書

5 製品仕様

製品名称	スマート顕微鏡
製品型番	DDL-M1C
最大解像度	1280x720ピクセル
静止画フォーマット	PNG
動画フォーマット	MP4
アプリケーション	Android/iOS/Windows
APP対応システム	Android8.0/iOS12.0以上
PC対応システム	windows7/8/10/11以上
接続方法	Wifi/Type-Cケーブル
wifi距離	約5メートル
使用電源	内蔵リチウムバッテリー700mAh
充電電源	DC5V≒1A、Type-C
満充電所要時間	約3.5h時間
満充電時連続使用時間	約2h時間
動作環境	-10℃～45℃
主な材質	ABS樹脂
本体重量	約101g
本体サイズ	約32x33x120mm

スマート顕微鏡

製品名称:スマート顕微鏡

製品型番:DDL-M1C

ブランド経営者: Beaverlabtech Limited Liability Company

電子メール: support@beaverlabtech.com

ウェブサイト: www.beaverlabtech.com

INS: https://www.instagram.com/beaverlabtech/

Twitter: https://twitter.com/BEAVERLABOS

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCU-prXL

BQS-DdJa-iEJ9Njg

Facebook: https://www.facebook.com/people/

BEAVERLAB-US/100093065594303/



217-210291